

Перчатки-электроды



Успешно помогают бороться
с заболеваниями суставов
пальцев рук и кисти

Руководство по эксплуатации



+ применение
в косметологии

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- В сочетании с традиционными методами лечения **Перчатки-электроды** (далее Перчатки) **успешно помогают бороться с такими заболеваниями как:**
- артритом и артрозом суставов пальцев рук и кисти;
 - подагрическим и псoriатическим артритом, ревматоидным артритом;
 - Туннельным синдромом запястья, синдромом срединного нерва;
 - онемением кистей и пальцев рук при шейном остеохондрозе и его неврологических осложнениях;
 - последствиями инсульта (паралич руки);
 - болями в руках при сахарном диабете и заболеваниях сосудов;
 - растяжениями или разрывами связок, переломами и другими видами механических повреждений;
 - другими хроническими заболеваниями, связанными с кистями рук.

При систематическом использовании Перчаток достигается:

- снятие болезненного напряжения мышц;
- улучшение координации движений пальцев;
- уменьшение судорог кисти и предплечья;
- повышение эластичности, упругости кожи.

Применение Перчаток в косметологии способствует:

- активной подтяжке кожи, укреплению мимических мышц;
- разглаживанию морщин;
- уменьшению отеков и одутловатости;
- повышению упругости и эластичности кожи;
- осветлению пигментных пятен и улучшению цвета кожи;
- стимуляции выработки собственного коллагена и эластина;
- коррекции отечных форм целлюлита, за счет стимуляции лимфодренажа и выведения шлаков;
- уменьшению количества и глубины растяжек, спаек и рубцов;
- улучшению тонуса скелетных мышц, создание красивого контура тела, подтяжка ягодиц, живота, плечевых мышц;
- улучшению формы груди, восстановлению груди после родов и при возрастных изменениях упругости бюста.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не рекомендуется применять Перчатки:

- при открытых кожных повреждениях;
- при ожогах, обморожениях, гангрене;
- при наличии острых воспалительных гнойных процессов, родимых пятен, плоских бородавок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Только для наружного применения.
2. Применение Перчаток не должно производиться в момент подключения пациента к высокочастотному хирургическому оборудованию.
3. Никогда не используйте подключенные к аппарату Перчатки в помещениях с повышенной влажностью, а также во время приема ванны или душа.
4. Возможно проявление раздражения кожи на кистях.
5. Возможна аллергическая реакция на материал Перчаток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




1. Если уровень силы воздействия при стимуляции доставляет или начинает доставлять неудобство, необходимо уменьшить амплитуду стимуляции до комфорtnого уровня.
2. Не подключайте Перчатки к другим устройствам.
3. Запрещается применять Перчатки на животных.
4. При длительном воздействии отрицательных температур, начинать пользоваться Перчатками можно не ранее 30 минут после нахождения их при комнатной температуре.
5. При появлении сомнения правильности работы Перчаток следует обратиться к представителю продавца, для проверки и ремонта. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 Прежде чем приступить к подключению, полностью убедитесь, что АНМС «Меркурий» выключен!

При воздействии на одну кисть:

1. Подсоедините провод-переходник к Перчатке.
2. Соедините разъем провода-переходника со штекером провода, входящего в комплект АНМС «Меркурий».
3. Убедитесь, что провод вставлен плотно, так, чтобы не был виден голый металл контактов.
4. Приложите электрод к месту воздействия (предплечье, запястье).
Прежде чем прикладывать электроды, убедитесь, что область кожи, на которую планируется расположить электроды, абсолютно чистая и сухая, электрод плотно прижат к коже.
5. Расположите электроды на коже тщательно, ровно и прямо.
6. Придерживая за изолированные части разъема провода, вставьте вилку в розетку на верхней части основного блока АНМС «Меркурий». Убедитесь, что провод подсоединен правильно.
7. Наденьте Перчатку на требующую воздействия кисть.
8. Включите АНМС «Меркурий» и выберете необходимый режим работы, программу и мощность воздействия.
9. После завершения процедуры совершите действия в обратном порядке.

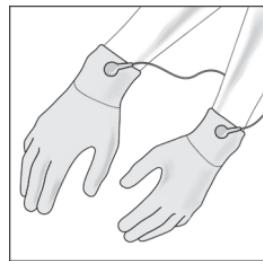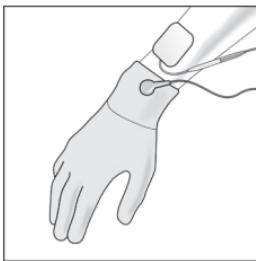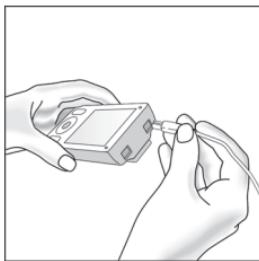

При одновременном воздействии на обе кисти:

Порядок подключения аналогичен подключению одной Перчатки, только вместо электрода, через провод-переходник, подсоединяется вторая Перчатка.

При проведении косметологических процедур:

Порядок подключения аналогичен подключению двух Перчаток, только

предварительно на кисти рук надеть резиновые перчатки (приобретаются отдельно), выполняющие роль диэлектрика.

 Внимание: перед каждым применением Перчатки необходимо слегка смочить водой!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- после каждого применения, а также перед обслуживанием, Перчатки следует отключить от аппарата;
- при загрязнении, Перчатки следует помыть в теплой воде с добавлением в воду небольшого количества нейтрального моющего средства и высушить при комнатной температуре;
- запрещается стирать Перчатки в стиральной машине, а также с применением химических препаратов;
- хранить Перчатки следует в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов при комнатной температуре;
- не допускается попадание воды или иной жидкости внутрь соединительных штекеров.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обращайтесь к торговому представителю в случае возникновения претензий в течение срока действия гарантии.

Гарантийные условия:

На Перчатки предоставляется гарантия сроком 1 месяц со дня покупки.

Настоящее руководство по эксплуатации с отметкой торгового представителя является документом для предъявления претензий пользователем.

В течение гарантийного срока торговый представитель обязуется отремонтировать Перчатки не надлежащего качества, если поломка возникла не по вине пользователя. В случае предъявления претензии пользователь обязан предъявить Перчатки в полной комплектации.

Гарантия не предоставляется в случаях:

- механических повреждений (потертости, порывы, порезы не являются основаниями для обращения по гарантии);
- не соблюдения условий хранения и эксплуатации пользователем, либо вследствии ошибочных действий пользователя, не соблюдения правил указанных в руководстве по эксплуатации;
- попадания во внутрь соединительных разъемов, штекеров посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- самостоятельного ремонта и/или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами;
- повреждения возникли в результате неправильного обращения с изделием.

Гарантия не предоставляется на материал Перчаток, соединительные швы с учетом нормального износа.

Ответственность за прямой или косвенный ущерб, причиненный Перчатками исключена, даже если повреждения воспринимаются как гарантийный случай.

Изготовитель и его торговый представитель не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неосторожного обращения с Перчатками.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Продавец (наименование и юр. адрес) _____

Ф. И. О. и подпись продавца _____

Печать продающей организации

Ф. И. О. и контакты покупателя _____

Настоящим подтверждаю, что с образцом товара (в том числе с техническими характеристиками, формой, габаритами, размером, расцветкой, условиями подключения, правильной эксплуатации и противопоказаниями) полностью ознакомлен; что мне представлена полная информация о проданном мне товаре, и мной приобретен именно тот товар, который Я имел намерения приобрести. Я информирован о продавце, импортере и изготовителе товара, организациях, уполномоченных на проведение гарантийного обслуживания приобретенного мной товара.

Товар получен, механических повреждений не имеет, к внешнему виду и комплектации товара претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ СИМВОЛЫ

-  Только ручная стирка. Не тереть, не отжимать. Максимальная температура — 40°C.
-  Запрещено выжимать и сушить в стиральной машине.
-  Нельзя отбеливать.
-  Не гладить.
-  Химчистка запрещена.
-  Внимание: прочтите инструкцию по применению перед началом работы.
-  Соответствует европейской медицинской продукции (93/42 EEC) с поправками, внесенными в соответствии с директивой 2007/47 EC требованиями.
-  См. руководство по эксплуатации.
-  Дата изготовления и номер партии.
-  Название и адрес производителя.
-  Утилизация в соответствии с директивой 2012/19/EU (WEEE).
-  Знак соответствия при обязательном подтверждении соответствия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перчатки-электроды	1 пара
Провод-переходник	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал:

Нейлон	71,8%
Резина	21,2%
Полиуретан	3,7%
Серебро	3,3%
Размер	универсальный
Вес брутто	100 г
Вес нетто	50 г

Изготовлено по заказу и под контролем
Компании «СТЛ» Россия, Москва.

www.stl-comp.ru



Производитель: Компания Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD
Район промышленной недвижимости Xili Bairang Xusheng, строение №3,
Наньшань, 518108, Шэньчжэнь, КНР